




Las balanzas analíticas Nimbus cuentan con una construcción duradera y fácil operación. Con lecturas de 0,0001 g, la balanza analítica Nimbus proporciona una experiencia de pesaje optimizada. Su diseño innovador le otorga un tamaño compacto, por lo que la balanza ocupa un espacio mínimo pero conserva un alto nivel de rendimiento. La construcción de metal sólido proporciona la durabilidad para soportar el riguroso uso diario y productos químicos. Un mecanismo eficiente y electrónico mejorado proporciona lecturas más coherentes. Las balanzas analíticas Nimbus tiene una cámara de pesaje acristalada, que se desmonta rápidamente para su limpieza.

Diseño innovador combinado con un potente rendimiento en una balanza de primera

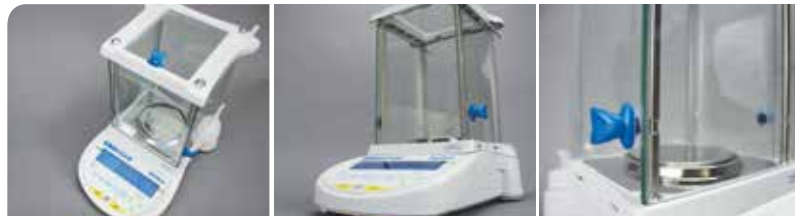

Características

- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Dispositivo de bloqueo para asegurar la balanza
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo
- Adaptador de CA incluido

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje dinámico / de animales
- Determinación de la densidad

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

| Modelo - Calibración Externa | NBL 84e | NBL 124e | NBL 164e | NBL 214e | NBL 254e |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Modelo - Calibración Interna | NBL 84i | NBL 124i | NBL 164i | NBL 214i | NBL 254i |
| Capacidad | 80g | 120g | 160g | 210g | 250g |
| Legibilidad | 0.0001g | | | | |
| Repetibilidad (S.D.) | 0.0002g / 0.0002g | 0.0002g / 0.0002g | 0.0002g | | |
| Linealidad (+/-) | 0.0002g | | | | |
| Tamaño del plato | 90mm ø | | | | |
| Unidades de medida | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, Unidad personalizada | | | | |
| Tiempo de estabilización (sec) | 3 | | | | |
| Interfaz | RS-232, USB | | | | |
| Calibración | Calibración Externa / Calibración Interna Automática | | | | |
| Pantalla | Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto | | | | |
| Alimentación de corriente | Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA | | | | |
| Temperatura de operación | 15° a 35°C | | | | |
| Carcasa | Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido | | | | |
| Cabina | Cámara 165x145x240mm | | | | |
| Dimensiones totales | 220x340x344mm (axpxa) | | | | |
| Peso Neto | 5.25kg / 5.85kg | | | | |

Accesorios

| No. de Artículo | Descripción |
|-----------------|--|
| 3014011014 | Cable RS-232 |
| 3074010267 | Cable USB |
| 3021210953 | Gancho para Pesaje por Debajo |
| 1120011156 | Impresora térmica Adam ATP |
| 104008036 | Mesa anti-vibración |
| 3126011263 | Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo) |
| 3126011281 | Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) |
| 600002028 | Software AdamDU (Recolección de datos) |
| 700660290 | Certificado de Calibración |
| 1060012713 | Kit de densidad para platos de 90mm |
| 3012313007 | Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg |
| 3012013009 | Cubierta de protección para platos de 90mm |
| 3014013041 | Cable de Seguridad |
| 700100207 | Juego de pesas de calibración E2, 1g a 200g |
| 700100022 | Pesa de calibración E2, 100g |
| 700100023 | Pesa de calibración E2, 200g |
| 700100232 | Pesa de calibración E2, 50g |

Características principales



Mesa anti-vibración

La mesa de anti-vibración AVT ofrece una superficie sólida y estable para ayudar a reducir la vibración durante la operación de balanzas analíticas o de precisión. La AVT puede ayudar a reducir las fluctuaciones y la inconsistencia en la medición que resulta de los efectos ambientales.



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

Suministrados por