


# LUZEREN®

## Microscopio Estéreo Triocular Zoom



### Descripción:

Microscopio estereoscópico triocular. Zoom de alta potencia para tener aplicación prácticamente en todos los campos de la ciencia. Con tubos oculares giratorios para ajuste interpupilar de 55 a 75 mm. Ajuste macrométrico con piñón, cremallera y control de tensión, oculares WF10X de campo amplio con cubre ojos, objetivos con zoom de 0.65x a 4.5x para 6.5 a 45 aumentos. Platina con vidrio claro despolido con 2 pinzas. Cabezal con palanca selectora de paso de luz.

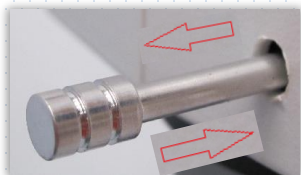

Palanca para activar paso de Luz.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001348</b>
Oculares de campo amplio	WF 10X/22mm
Cabezal	Rotatorio 360° con inclinación a 45°
Iluminación ajustable	Incidente de halógeno 12V/20W Transmitida fluorescente 5W/120VAC
Ajuste dióptrico	+/-5dp
Peso	6 Kg
Medidas totales	485*200*270mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz